


## Electronic Lice Comb

Model 15-001

**THANK YOU FOR PURCHASING A VERIDIAN HEALTHCARE ELECTRONIC LICE COMB. READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY TO ENSURE PROPER AND SAFE OPERATION OF YOUR COMB.**

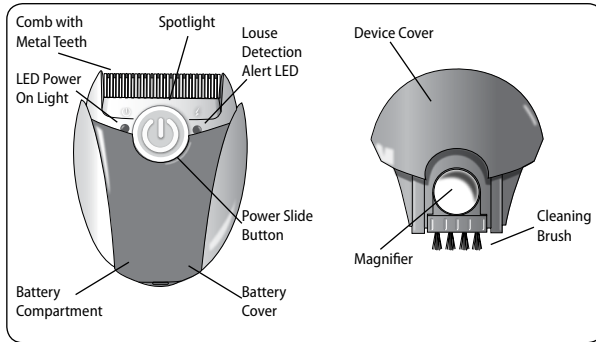

**HEAD LICE** are tiny, wingless, parasitic insects that live and feed on blood from the host's scalp. **NITS** are the small lice eggs and empty egg sacks left behind after the lice hatches.

Lice and nits are easiest to detect at the neckline and behind the ears. Head lice affects millions of people each year, especially preschool and elementary school-aged children and their close contacts. Infestation most commonly spreads through close personal contact and by sharing personal belongings such as hats and clothing.

Head lice have a life cycle of about 40 days. Each louse is responsible for about 200-300 eggs (nits) which will be laid during this lice life-cycle and will hatch within 10 days.

Lice have been among us for thousands of years. Various chemical treatments have been used to eradicate infestations, including DDT and other formulas containing strong chemicals which are typically applied direct to children's scalps. Over time head lice have built up immunities to some treatment shampoo formulations.

The Electronic Lice Comb kills adult lice effectively without use of chemical shampoos. Careful review and practice of the instructions for this device can help offer your family a safe, effective and chemical-free solution for a lice infestation.

### INFESTATION SYMPTOMS

The infected person will typically experience a tickling feeling in the hair, intense itching, and red bumps on the scalp, neck or shoulders. Lice cement their eggs firmly onto the base of hair shafts, very close to the scalp. They are extremely tiny, about the size of a strawberry seed, but can be up to 1/8 inch (3 millimeters) in size.

### HOW DOES AN ELECTRONIC LICE COMB WORK?

The Electronic Lice Comb works by transmitting a small electrical charge to the comb's metal teeth. When the metal teeth are combed through dry hair, this electric charge will kill adult lice. The red Louse Detection Alert LED will illuminate when a louse had been detected, killed and caught in the metal teeth. Simply remove the louse; the light will turn off and recommence combing the hair.

The Electronic Lice Comb kills ADULT lice. The combing will help remove small nits, but does not kill the eggs and some may remain attached to the hair follicle. It is recommended that combing treatments are repeated every 2-3 days for 10 days to ensure that all lice have been eliminated.

### OPERATING INSTRUCTIONS


For best performance and optimal efficiency of this device, please read and conform strictly to the following instructions—

#### Before Use:

- Hair must be dry before using this electronic device. This device should not be used simultaneously with any shampoos or other treatments.
- For best results, hair should be free of styling product, i.e. gels or mousses.
- Before treatment, comb the hair thoroughly with a regular comb to free all knots. The tines of the lice comb are purposefully very close and may have difficulty combing the hair if the hair has not been previously combed.

#### Operating the Lice Comb:

- This device has a 3-position power switch: **OFF** - slide all the way back, away from the comb teeth  
**ON** - slide one click forward; green LED power light illuminates  
**ON with SPOTLIGHT** - slide forward towards the comb teeth; green power light illuminates and bright LED spotlight illuminates
- Hold the lice comb at a 45-degree angle (the ON button is facing up towards the user) and start combing with the teeth of the comb near the hair-roots. The SPOTLIGHT and Magnifier can help see the lice in low light setting or on those persons with dark hair.
- When the comb has trapped and killed a louse, the amber Louse Detection Alert light will illuminate.
- Stop combing the hair, and remove the louse from the comb teeth. The brush located on the underside of the device can help clean the teeth.
- After the louse is clear, the light will turn off and the comb is ready for use again.

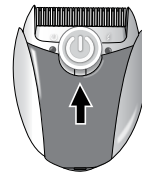

As with most common lice treatment methods, it is recommended that the treatment be repeated over the course of the egg nit hatching (10 days) to ensure the infestation is full eradicated. For maximum effectiveness, repeat the treatment every 2-3 days for 10 total days.

### CLEANING AND STORAGE

**Cleaning:** The metal teeth can be cleaned with the mini brush built into the lice comb cover.

The teeth and outer body of the device may also be wiped gently with a cloth dampened with rubbing alcohol (70% isopropyl alcohol). Allow to dry completely before use or storage.

NEVER immerse the device in water.



**Storage:** Use the included cover and store the unit in a secure, dry, dust-free place when not in use. Avoid extreme temperatures. Do not attempt to disassemble the unit.

### BATTERY INSTALLATION

**This device comes complete with 1 AAA battery.** The battery should be replaced when the amber light flickers, or the device will not turn on.

- Remove the battery cover.
- Remove and replace the battery, taking care to note the proper polarity.
- Replace the battery cover.
- It is recommended to remove the battery if the unit will not be used for an extended period of time.

*Always follow local regulations for proper disposal of batteries.*

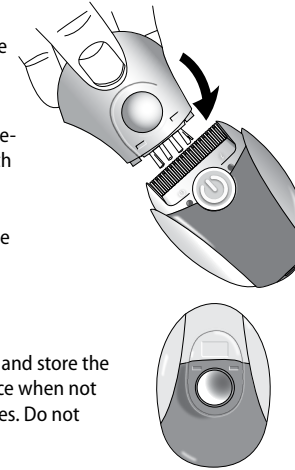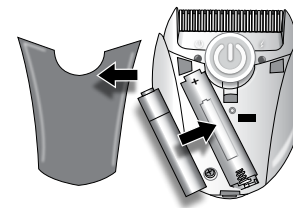

### WARNINGS & CAUTIONS

- The Electronic Lice Comb should be used on head hair (scalp) only; body and genital lice are not the same as head and scalp lice and require different treatments
- Do not use this device on pets; pets cannot carry human head lice and should not be treated with this product
- Do not hold metal combs with fingers when the POWER is switched on
- The device is not water proof. Do not immerse it in any liquid
- Never place in the mouth or on any other body parts except on head hair
- This device should not be operated by or applied to persons with epileptic conditions and/or heart-failure patients
- The appliance may disrupt the operation of electronic health devices
- Some sensitive persons may feel slight tingling (sometimes this can be caused from perspiration); there is NO electric shock risk
- Lice Comb should be used on children by adults only
- Avoid dropping and other heavy impact on the lice comb
- Will not operate on wet or excessively oily hair

### TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Amber LED stays on	Dirt is caught between metal teeth	Clean the comb/metal teeth
Amber LED flickers	Low Battery	Replace the battery
Louse caught but Amber LED is not on	Dirt/lice on comb	Clean the comb
	Lice is too small or off the comb	Lice is destroyed, continue operation

**Toll-Free Customer Care Help Line: 1-866-326-1313**

**Monday – Friday 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST**


Distributed by:  
Veridian Healthcare  
1175 Lakeside Drive  
Gurnee, IL 60031  
www.veridianhealthcare.com  
Made in China

#93-1176 10/14  
©2014 Veridian Healthcare, LLC

# Peine eléctrico para eliminar piojos

Modelo 15-001

**GRACIAS POR COMPRAR EL PEINE ELECTRÓNICO FINITO PARA ELIMINAR LOS PIOJOS. LEA LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE PARA ASEGURAR EL USO APROPIADO Y EL FUNCIONAMIENTO SEGURO DE SU PEINE.**

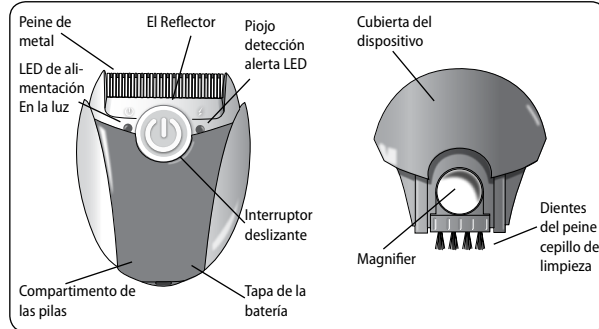

Los **PIOJOS DE CABEZA** son pequeños insectos parásitos sin alas que viven y se alimentan de la sangre del cuero cabelludo del huésped. Las **LIENDRES** son los huevos de los piojos y las bolsas vacías de los huevos que quedan después de incubados.

Los piojos y las liendres se detectan más fácil en el cuello y detrás de las orejas. Todos los años, los piojos de la cabeza afectan a millones de personas, en especial a niños que asisten al preescolar y a la escuela primaria y a quienes están en contacto cercano con ellos. La forma más común de infestación es a través del contacto personal cercano y por compartir las pertenencias personales, como ser sombreros y ropa.

Tienen un ciclo de vida de aproximadamente 40 días. Durante este ciclo, cada piojo deposita aproximadamente de 200 a 300 huevos (liendres) que tardan 10 días en incubar.

Han estado entre nosotros por miles de años. Para erradicar las infestaciones se han utilizado diversos tratamientos químicos, entre ellos DDT y otras fórmulas con fuertes componentes químicos que por lo general se aplicaban directamente sobre el cuero cabelludo de los niños. Con el tiempo el piojo se hizo inmune a algunas fórmulas de champú tratante.

El peine electrónico mata al piojo adulto de manera eficaz y sin usar un champú químico. La revisión y práctica cuidadosa de las instrucciones de este dispositivo le ayudarán a brindar a su familia una solución segura, eficaz y libre de soluciones químicas para combatir la infestación de piojos.

## INFESTATION SYMPTOMS

Por lo general la persona infectada tendrá una sensación de cosquilleo en el cabello, comezón intensa y manchas rojas en el cuero cabelludo, cuello

u hombros. Los piojos adhieren los huevos fuertemente a la base del cabello, muy cerca del cuero cabelludo. Son extremadamente pequeños, aproximadamente el tamaño de una semilla de frutilla, pero pueden llegar a medir 1/8 pulgadas (3 milímetros).

## ¿CÓMO FUNCIONA EL PEINE ELECTRÓNICO?

El peine electrónico elimina los piojos funciona mediante la transmisión de una pequeña carga eléctrica a sus dientes metálicos. Cuando los dientes metálicos se pasan por el cabello seco, esta carga eléctrica matará al piojo adulto. Cuando el peine detecta, mata y atrapa un piojo en los dientes metálicos, se iluminará el LED rojo de Alerta de Detección de Piojo. Simplemente quite el piojo; la luz se apagará y vuelva a peinar el cabello.

El peine electrónico mata al piojo ADULTO. El peinado ayudará a quitar las pequeñas liendres, pero no mata los huevos y algunos pueden permanecer adheridos al folículo capilar. Se recomienda repetir el tratamiento cada 2 o 3 días durante 10 días para tener la certeza de que se han eliminado todos los piojos.

## INSTRUCCIONES DE USO


Para un mejor rendimiento y óptima eficacia de este dispositivo, lea y siga estrictamente las siguientes instrucciones—

### Antes de Uso:

1. El cabello tiene que estar seco. Este dispositivo no se debe usar simultáneamente con champús u otros tratamientos.
2. Para mejores resultados, no aplique ningún producto para modelar el cabello (gel o mousse).
3. Antes del tratamiento, peine cuidadosamente el cabello con un peine común para eliminar los nudos. Los dientes del peine están ex profeso muy cerca uno de otro y pueden dificultar el peinado si el cabello no se peinó anteriormente.

### Cómo usar el peine para eliminar piojos:

1. Este dispositivo tiene un interruptor de encendido/apagado de 3 posiciones:  
**OFF (APAGADO)** – deslícelo hacia atrás, lejos de los dientes  
**ON (ENCENDIDO)** – deslice un clic hacia delante; se ilumina la luz verde de LED  
**ON (ENCENDIDO) con SPOTLIGHT (LINTERNA)** – deslice hacia los dientes; se ilumina la luz verde de encendido y se ilumina el LED brillante
2. Sostenga el peine en un ángulo de 45 grados (el botón ON está hacia arriba de cara al usuario) y comience a peinar con los dientes cerca de la raíz del cabello. La LINTERNA le ayuda a ver al piojo en un lugar con poca luz o en personas de cabello oscuro.
3. Cuando el peine atrapa y mata a un piojo, se enciende la luz amarilla de Alerta de Detección de Piojo.

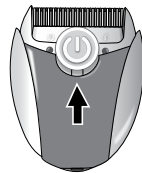

4. Deje de peinar y quite el piojo de los dientes del peine. El cepillo que se encuentra en la parte posterior sirve para limpiar los dientes.
5. Luego de sacar el piojo, la luz se apaga y el peine está listo para usarse de nuevo.

Al igual que con los métodos comunes de tratamiento para eliminar los piojos, se recomienda repetirlo durante el periodo de incubación de los huevos (10 días) para la erradicación completa de la infestación. Para que sea más efectivo, repita el tratamiento cada 2 o 3 días durante los 10 días.


## LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

**Limpieza:** El peine de metal puede ser limpiado con el mini cepillo incorporado en la tapa del peine piojos.

Los peines y el cuerpo externo del dispositivo pueden también limpiarse suavemente con un paño humedecido con alcohol (alcohol isopropílico al 70%). Permite probar completamente antes de usar o almacenamiento.

NUNCA sumerja el aparato en agua.

**Almacenamiento:** Utilice la cubierta incluida y almacene la unidad en un lugar seguro, seco, libre de polvo cuando no esté en uso. Evite temperaturas extremas. No intente desmontar la unidad.

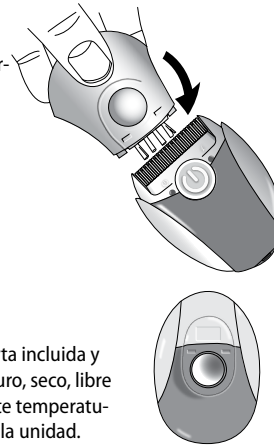


## COLOCACIÓN DE LA BATERÍA

**Viene con 1 batería AAA.** The battery should be replaced when the red LED light flickers, or the device will not turn on.

1. Retire la tapa de la batería.
2. Quite y reemplace la batería, con la polaridad correcta.
3. Coloque nuevamente la tapa de las baterías.
4. Se recomienda retirar las baterías si no usará la unidad durante un período prolongado.

*Siempre siga las normas locales para deshacerse de las baterías de la forma correcta.*

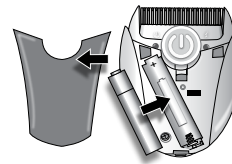

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- El peine electrónico FINITO para la eliminación de piojos se debe usar solo en el cabello (cuero cabelludo); los piojos del cuerpo y de los genitales no son los mismos que los de la cabeza y cuero cabelludo y requieren de tratamientos diferentes
- No use este dispositivo en mascotas; las mascotas no tienen el piojo humano y no deben tratarse con este producto
- No sostenga los dientes metálicos con los dedos cuando está ENCENDIDO
- No es a prueba de agua. No lo sumerja en ningún líquido
- No lo coloque nunca en la boca o en cualquier otra parte del cuerpo que no sea el cabello
- Las personas con epilepsia y/o pacientes cardíacos no deben utilizar este dispositivo, ni tampoco tiene que ser utilizado con ellas.
- La aplicación puede interrumpir el funcionamiento de dispositivos electrónicos para la salud
- Algunas personas sensibles pueden tener un leve cosquilleo (a veces esto lo puede ocasionar la transpiración); NO hay peligro de descarga eléctrica
- Solo los adultos pueden utilizar el peine con los niños
- Evite que se caiga y cualquier otro impacto fuerte
- No funcionará en cabello mojado o excesivamente grasoso

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
La luz sigue encendido	Suciedad está atrapada entre los dientes	Limpia el peine de metal
La luz parpadea	Batería baja	Reemplace la batería
Piojo atrapado pero la luz no está en	Suciedad, piojos en peine	Limpia el peine de metal
	Los piojos es demasiado pequeños o apagar el peine	Los piojos se destruye, continúe la operación

**Toll-Free Customer Care Help Line: 1-866-326-1313**  
**Monday – Friday 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST**

Distributed by:  
Veridian Healthcare  
1175 Lakeside Drive  
Gurnee, IL 60031  
www.veridianhealthcare.com  
Made in China

#93-1176 10/14  
©2014 Veridian Healthcare, LLC