

**R.P.M.
PRO**TM

DIGITAL WEIGHT SCALE

MODEL 210-1113C

INSTRUCTION MANUAL




Please read this instruction manual
completely before operating this unit.


STOP!
PLEASE ENSURE YOU HAVE ALL OF THE FOLLOWING
COMPONENTS BEFORE USING YOUR DIGITAL WEIGHT
SCALE



Digital Scale

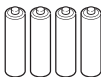

Four (4) AA
Batteries
Preinstalled

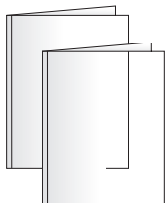

Instruction Manual

INTENTION FOR USE

This product is specially designed for body weight measurement for persons who are able to stand on the scale platform for medical purposes. It should never be used for verification of goods' weight. Personal weight results should be discussed with your physician or healthcare professional; this device is not intended to diagnose, treat or prevent an illness.

INDEX

Care & Safety Information	4-5
Attention	6
Product Overview	7
Battery Installation	8
Mode Selection	9
Intention for Use	10-11
Care & Maintenance	12
Troubleshooting & Error Codes	13
Device & Label Symbols	14
FCC Information	15
Electromagnetic Chart	16-18
Specifications	19
Warranty	20
Instructions in Spanish	21-40

Toll-Free
Customer Care Help Line:

1-866-326-1313

Monday – Friday
8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST
www.veridianhealthcare.com

R.P.M. PRO
Manufactured for
Veridian Healthcare
1175 Lakeside Drive
Gurnee, IL 60031

Made in China

#93-1606 04/25
©2025 Veridian Healthcare

CARE & SAFETY INFORMATION

NOTE: Read all instructions carefully before use. The following basic precautions are needed when using an electrical product.

NOTE: Failure to read and observe all precautions could result in personal injury or equipment damage.

SAFETY CAUTIONS AND WARNINGS

- Do not use on slippery floor such as some tiles or laminates
- Do not use with wet feet; feet should be completely dry before use
- Do not use near a cell phone or microwave oven
- Do not drop the scale; take care not to drop items onto the scale; do not jump onto the scale or while on the scale
- Always stand in the center of the scale; do not stand on the edges or allow feet to hang off the edge(s)

GENERAL CAUTIONS AND WARNINGS

- Do not use the unit if it has any damaged parts or if the top is cracked
- If any abnormality occurs, discontinue use until the unit has been examined and repaired
- Do not disassemble the unit or attempt to repair it; doing so may result in results error and will void manufacturer warranty
- Always follow local regulations for proper disposal of the digital scale and batteries
- Do not use this device simultaneously with other diagnostic monitoring equipment

CARE & SAFETY INFORMATION

OPERATING CAUTIONS AND WARNINGS

- Operation outside of stated operating temperature may result in measurement error or device malfunction; operation environment temperature is:
Temperature: 5°C to 40°C / 41°F to 104°F
Relative Humidity: ≤90% RH
Atmospheric pressure: 860hPa to 1060hPa
- Read and follow the Instructions For Use section of this manual for safe use of this device

STORAGE CAUTIONS AND WARNINGS

- Storage outside of stated storage temperature may result in measurement error or device malfunction; storage environment temperature is:
Temperature: -20°C to 60°C / -4°F to 140°F
Relative Humidity: ≤90%
Atmospheric pressure: 500hPa to 1060hPa
- Avoid storage near water, moisture or excessive humidity
- Avoid storage in extreme temperatures, direct sunlight, dust or salt air
- Keep out of the reach of infants, children or incapacitated persons

CLEANING CAUTIONS AND WARNINGS

- Never immerse the unit in water to clean as it may damage the unit
- Follow the 'Cleaning and Maintenance' portion of this manual for instruction on how to clean and care for your scale


ATTENTION!

This manual is intended for instruction on operating this weight scale as a stand-alone measurement device.

Your Weight Scale **MAY HAVE** connectivity to a Smartphone App, Digital Alert Device, Hub or other Assistive Technology.

For instructions on how to connect your Weight Scale with other devices, please consult the documentation that was provided with the device.

PRODUCT OVERVIEW

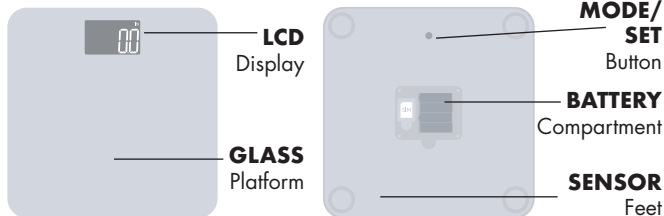

kg	Kilogram		Signal Symbol
lb	Pounds		Data Transmitting
st lb	Stone		Data Pending to Transmit
	Battery Symbol		No SIM Card Information

DETAILS OF THE DIGITAL DISPLAY SCREEN AND INTERPRETATION OF THE SYMBOLS ARE INCLUDED THROUGHOUT THIS MANUAL.

BATTERY INSTALLATION

THIS UNIT INCLUDES 4 AA BATTERIES, PREINSTALLED.

When using for the first time, remove the pull strip to activate the batteries.


It is necessary to replace the batteries when the low battery symbol appears on the display or when the display does not turn on when the scale is activated.

1. Slide open the battery compartment on the backside of the device.
2. Insert or replace 4 AA batteries into the battery compartment, ensuring to match the indicated polarity symbols. Always use new batteries.

When batteries are first installed, the display will briefly show a test display.

3. Replace the battery cover.
4. Dispose of batteries according to local disposal and recycling regulations.

It is recommended to remove the batteries if the unit will not be used for an extended period of time.

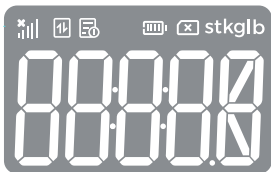


When batteries are first installed, the display will briefly show all digits.

MODE SELECTION—LB, KG, STONE

This scale will automatically default to pound (LB) unit of measure.

1. To change the unit of measure mode, press and release the UNIT button on the back side of the scale.
2. The display will alternate between 'lb', 'kg' and 'st lb'.
3. When the desired unit of measure is shown, release the button.
The unit of measure mode is now set

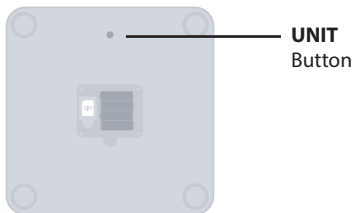

INSTRUCTIONS FOR USE

SENSE ON Technology—This digital scale will automatically turn on when you step onto the scale. It is not necessary to turn the unit ON/OFF.

FOR BEST RESULTS:

- Weigh yourself before eating
- Weigh yourself at the same time of day; ideally in the mornings after using the bathroom
- Weigh yourself naked or in minimal clothing
- The Digital Scale should be used on a flat, hard surface
- Use on soft surfaces such as carpeting may affect the accuracy of your results
- Remain still; do not hold onto or lean on anything

SIMPLE STEP INSTRUCTIONS:

1. Step onto the scale. Stand still with your feet evenly planted on the scale surface, which will result in a more even weight distribution and more accurate results.
2. Stand still and keep full contact with the scale surface.
3. Allow the scale several seconds to calculate the final results; you will notice the numbers fluctuate multiple times before the true weight is reached.
4. The results will show on the display in the selected mode – **LB**, **KG**. The results will display for approximately 10 seconds.
5. Device will turn off approximately 10-seconds after data transmission is complete.



INSTRUCTIONS FOR USE



Stand still and keep feet in full contact; the results will blink twice and then lock as the final result.

The Signal symbol at the upper left will indicate that the cellular connection is successful.



If the scale fails to connect, the Signal symbol will appear with an 'x'.



After connecting, the weight results data will be transmitted; when data is successfully transmitted, OK and the data transmitting symbol will appear on the display.



If the data fails to transmit, the Data Pending symbol will appear.

CARE & MAINTENANCE

Use common sense caution when cleaning an electronic device.

- The scale may be dusted with a soft cloth, or wiped down with a damp cloth.
- Always dry the scale top after cleaning.
- Never get excessively wet or submerge the scale in water.
- Never use propellant, abrasive or other chemicals on the scale.
- Do not disassemble this device; doing so may void the manufacturer's warranty.
- Follow the Operating and Storage Temperature ranges as indicated in the Specifications section of this manual.
- Follow the indicated weight range capacity; weight in excess of the stated range may damage the unit.
- It is recommended that the battery be removed if the scale will not be used for an extended period of time.

TROUBLESHOOTING & ERROR CODES

ERROR	DESCRIPTION	SOLUTION
	Overload / too much weight is on the scale.	Retake measurement; user may be out of weight range (11 lb to 440 lb)
	SIM error	Check and reinstall the SIM card if the issue persists, contact customer support
	No signal	Move signal to stronger signal place; contact customer care
	Hardware error	Retake measurement; If the issue persists, contact customer support
	Data transmission error	Move to new area, closer to a window; use device at a location where mobile phone has strong signal
	No cellular coverage or cellular connection error	Move to new area, closer to a window; use device at a location where mobile phone has strong signal
	Preloaded SIM card is replaced or subscription no longer valid	Ensure SIM card is the original card; do not replace SIM card by yourself; contact customer support
	Server connection error	Move to new area, closer to a window; use device at a location where mobile phone has strong signal
	Certificate error	Contact customer support
	Hardware error	Retake measurement; if issue persists contact customer support

DEVICE & LABEL SYMBOLS

These symbols may appear on your device, instructions or packaging and may vary by make and model.

 Refer to the instruction manual/booklet. NOTE: The background color of this symbol is blue.	 Non-ionizing electromagnetic radiation
 Serial Number	 Date of Manufacture
 Direct Current	 General symbol for recovery / recyclable
 Type BF Applied Part	 Keep Dry
 FCC: This device can be expected to comply with part 15 of the FCC Rules	 Batch Code
IP21 It means the device could be protected against solid foreign objects for 12,5mm Φ and greater, and against vertically falling water drops.	 The symbol indicates that the product should not be discarded as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recover and recycling.
 Caution: Indicates that caution is necessary when operating the device or control close to where the symbol is placed, or that the current situation needs operator awareness or operator action in order to avoid undesirable consequences	

FCC INFORMATION

IMPORTANT INFORMATION REQUIRED BY THE FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference; and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA).

These requirements set a SAR limit of 4.0 W/kg averaged over one gram of tissue.

The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the extremity (hands/feet/ankle/wrist).

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

Guidance and manufacture's declaration - electromagnetic emissions

The ME EQUIPMENT or ME SYSTEM is suitable for home healthcare environments.

Warning: Don't be near the active HF surgical equipment and the RF shielded room of an ME system for magnetic resonance imaging, where the intensity of EM disturbances is high.

Warning: Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally.

Warning: Use of accessories, transducers and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.

Warning: Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the equipment including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.

Table 1

Guidance and manufacture's declaration - electromagnetic emissions

Emission test	Compliance
RF emissions CISPR 11	Group 1
RF emissions CISPR 11	Class B
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Not Applicable
Voltage fluctuations and flicker IEC 61000-3-3	Not Applicable

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

Table 2

Immunity test	IEC60601-1-2 test level	Compliance level
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV contact; ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV air	± 8 kV contact ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV air
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	Not Applicable	Not Applicable
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-5	Not Applicable	Not Applicable
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	Not Applicable	Not Applicable
Power frequency magnetic field IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz / 60 Hz	30 A/m 50 Hz / 60 Hz
Conducted RF IEC61000-4-6	Not Applicable	Not Applicable
Radiated RF IEC61000-4-3	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80% AM at 1 kHz	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80% AM at 1 kHz

NOTE: U_T is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

Table 3

Guidance and manufacture's declaration - electromagnetic emissions

Radiated RF IEC61000-4-3 (Test specifications for ENCLOSURE PORT IMMUNITY to RF wireless communication s equipment)	Test Immunity MHz	Band MHz	Service	Modulation	Modulation Power (W)	Distance (m)	Immunity Test Level (V/m)	Compliance Level (V/m)
	385	380-390	TETRA 4000	Pulse modulation b) 18Hz	1, 8	0, 3	27	27
	450	430-470	GMRS 460, FRS 460	FM c) ± 5 kHz deviation 1 kHz sine	2	0, 3	28	28
	710	704-787	LTE Band 13,17	Pulse modulation b) 217 Hz	0, 2	0, 3	9	9
	745							
	780							
	810	800-960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Pulse modulation b) 18 Hz	2	0, 3	28	28
	870							
	930							
	1720	1700-1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1,3,4,25; UMTS	Pulse modulation b) 217 Hz	2	0, 3	28	28
	1845							
	1970							
	2450	2400-2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Pulse modulation b) 217 Hz	2	0, 3	28	28
	5240	5100-5800	WLAN 802.11a/n	Pulse modulation b) 217 Hz	0, 2	0, 3	9	9
	5500							
	5785							

SPECIFICATIONS

Name	Digital Weight Scale
Model Number	210-1113C
Display System	Digital LCD
Scale Dimensions	12.6" x 12.6" x 1.12" / 320 x 320 x 28.5mm
Scale Weight	4.7 lbs./2.16 kg (without battery)
Measuring Unit	Pound (lb) / Kilogram (kg) / Stone (st lb)
Measuring Range	11 lb – 440 lb / 5 kg – 200 kg
Division	0.1kg/0.2lb
Accuracy	5-100kg, 0.05kg/0.2lb; 100.1-200kg, 200±0.5kg
Operating	Temperature: 5°C to 40°C / 41°F to 104°F Relative Humidity: ≤90% RH Atmospheric pressure: 860hPa to 1060hPa
Storage	Temperature: -20°C to 60°C / -4°F to 140°F Relative Humidity: ≤90% Atmospheric pressure: 500hPa to 1060hPa
Power Source	6V 4 AA batteries
Battery Life	Approximately 650 measurements
Auto-On	Sense On Technology
Auto-Off	After 10 seconds of non-use
Mode of Operation	Continuous Operation
Accessories	Instruction Manual; Four (4) AA Batteries

Specifications are subject to change without notice

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Congratulations on your purchase of a Weight Scale. Your Weight Scale is covered by the following limited warranty commencing upon the date of purchase, and subject to the following terms and conditions:

The Warrantor warrants that its Weight Scale will be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for a period of one year for the original purchaser of the product.

Periodic maintenance, repair and replacement of parts due to normal wear and tear are excluded from coverage. Defects or damage that result from: (a) improper operation, storage, misuse or abuse, accident or neglect, such as physical damage (cracks, scratches, etc.) to the surface of the product resulting from misuse; (b) contact with liquid, water, rain, extreme humidity or heavy perspiration, sand, dirt or the like, extreme heat, or food; (c) use of the Weight Scale for commercial purposes or subjecting the Weight Scale to abnormal usage or conditions; or (d) other acts which are not the fault of the Warrantor, are excluded from coverage. This warranty does not cover batteries or other power sources that may be provided with, or used with the Weight Scale.

If the Weight Scale fails to conform to this limited warranty, return the Weight Scale postage prepaid to: Attn: Repair Department, 1175 Lakeside Drive, Gurnee, IL, 60031. When returning a product, please also include: (i) a copy of your receipt, bill of sale or other comparable proof of purchase; (ii) a written description of the problem; and (iii) your name, address and telephone number. Carefully package the product to avoid any damage that may occur while in transit; shipping insurance with returned receipt is recommended. At our option, the Warrantor will repair or replace the unit found to be defective in materials or workmanship under normal consumer usage. The purchaser will be notified of any additional repairs required prior to completing the repair, and will be responsible for parts charges, if any, and repair charges not covered by this limited warranty.

EXCEPT AS PROVIDED FOR IN THIS LIMITED WARRANTY, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS ARE DISCLAIMED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER, AND IS PROVIDED IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. IN NO EVENT SHALL THE WARRANTOR BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) FOR DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, OR FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR FOR DAMAGES TO, OR LOSS OF, OTHER PROPERTY OR EQUIPMENT OR PERSONAL INJURIES TO THE FULL EXTENT THESE DAMAGES MAY BE DISCLAIMED BY LAW.

Some states and jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitation on the length of an implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or from one jurisdiction to another.

**R.P.M.
PRO**TM

BÁSCULA DIGITAL

MODELO 210-1113C

MANUAL DE INSTRUCCIONES




Lea completamente este manual de instrucciones
antes de operar esta unidad.


¡ALTO!
ASEGÚRESE DE TENER TODOS LOS SIGUIENTES
COMPONENTES ANTES DE USAR LA BÁSCULA DIGITAL.



Báscula digital

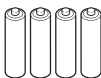

Cuatro (4)
pilas AA
preinstaladas

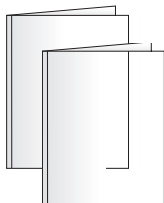

Manual de
instrucciones

USO PREVISTO

Este producto está diseñado especialmente para medir el peso corporal de las personas que pueden pararse sobre la plataforma de la báscula con fines médicos. Nunca debe utilizarse para verificar el peso de objetos. Debe discutir los resultados del peso personal con su médico o profesional de atención médica; este dispositivo no está diseñado para diagnosticar, tratar ni prevenir una enfermedad.

ÍNDICE

Información sobre cuidados y seguridad.....	24-25
Atención	26
Descripción general del producto.....	27
Instalación de las pilas	28
Selección de modo.....	29
Uso previsto	30-31
Cuidado y mantenimiento	32
Solución de problemas y códigos de error	33
Símbolos del dispositivo y etiquetas	34
Información de la FCC.....	35
Tabla de datos electromagnéticos	36-38
Especificaciones.....	39
Garantía	40

Línea gratuita
de Atención al Cliente:

1-866-326-1313

De lunes a viernes
8:30 a. m. – 4:30 p. m. CST
www.veridianhealthcare.com

R.P.M. PRO
Fabricado para
Veridian Healthcare
1175 Lakeside Drive
Gurnee, IL 60031

Hecho en China

N.º 93-1606 04/25
©2025 Veridian Healthcare

INFORMACIÓN SOBRE CUIDADOS Y SEGURIDAD

NOTA: Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar. Es necesario tomar las siguientes precauciones cuando se usa un producto eléctrico.

NOTA: No leer ni respetar todas las precauciones podría provocar lesiones personales o daños en el equipo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No usar en pisos resbaladizos, como algunos tipos de baldosas o pisos laminados.
- No usar con los pies mojados; los pies deben estar completamente secos antes de su uso.
- No usar cerca de un teléfono celular o microondas.
- No deje caer la báscula; tenga cuidado de no dejar caer objetos sobre la báscula; no salte sobre la báscula o mientras está arriba de ella.
- Párese siempre en el centro de la báscula; no se pare en los bordes ni permita que los pies cuelguen de los bordes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS GENERALES

- No utilice la unidad si tiene piezas dañadas o si la parte superior está agrietada.
- Si la unidad comienza a funcionar de manera anormal, suspenda su uso hasta que la unidad haya sido examinada y reparada.
- No desmonte la unidad ni intente repararla; si lo hace, puede provocar un error en los resultados y anulará la garantía del fabricante.
- Siga siempre las normas locales para desechar correctamente la báscula digital y las pilas.
- No utilice este dispositivo simultáneamente con otros equipos de monitoreo de diagnóstico.

INFORMACIÓN SOBRE CUIDADOS Y SEGURIDAD

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

- El funcionamiento fuera de la temperatura de funcionamiento indicada puede provocar errores de medición o un funcionamiento incorrecto del dispositivo; la temperatura del entorno de operación es:
Temperatura: 5 °C a 40 °C / 41 °F a 104 °F
Humedad relativa: ≤90 % HR
Presión atmosférica: de 860 hPa a 1060 hPa
- Lea y siga la sección Instrucciones de uso de este manual para usar este dispositivo de manera segura.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE ALMACENAMIENTO

- El almacenamiento fuera de la temperatura de almacenamiento indicada puede provocar errores de medición o un funcionamiento incorrecto del dispositivo; la temperatura del entorno de almacenamiento es:
Temperatura: -20 °C a 60 °C / -4 °F a 140 °F
Humedad relativa: ≤90 %
Presión atmosférica: de 500 hPa a 1060 hPa
- Evite el almacenamiento cerca del agua, la humedad o la humedad excesiva.
- Evite almacenar en temperaturas extremas, luz solar directa, polvo o aire salado.
- Mantenga lejos del alcance de bebés, niños o personas incapacitadas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA

- Nunca sumerja la unidad en agua para limpiarla, ya que puede dañarla.
- Siga las instrucciones de la sección "Limpieza y mantenimiento" de este manual para obtener instrucciones sobre cómo limpiar y cuidar su báscula.


¡ATENCIÓN!

Este manual está destinado a brindar instrucciones sobre el funcionamiento de esta báscula como dispositivo de medición autónomo.

Su báscula PUEDE TENER la capacidad de conectarse a una aplicación para teléfonos inteligentes, dispositivo de alerta digital, concentrador u otras tecnologías de asistencia.

Para obtener instrucciones sobre cómo conectar su báscula digital a otros dispositivos, consulte la documentación incluida con el dispositivo.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

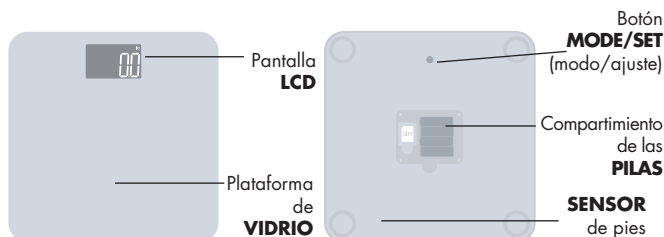

kg Kilogramo

lb Libras

st lb Stone

 Símbolo de pila

 Símbolo de señal

 Transmisión de datos

 Transmisión de datos pendiente

 No hay información en la tarjeta SIM

A LO LARGO DE ESTE MANUAL SE INCLUYEN LOS DETALLES DE LA PANTALLA DIGITAL Y LA INTERPRETACIÓN DE LOS SÍMBOLOS.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

ESTA UNIDAD INCLUYE 4 PILAS AA PREINSTALADAS.

Cuando use el dispositivo por primera vez, retire la tira para activar las pilas.

Debe reemplazar las pilas cuando aparezca el símbolo de batería baja en la pantalla o cuando la pantalla no se encienda al activar la báscula.

1. Deslice para abrir el compartimiento de las pilas en la parte posterior del dispositivo.
2. Inserte o cambie las 4 pilas AA en el compartimiento de las pilas, asegurándose de que coincidan con los símbolos de polaridad indicados. Use siempre pilas nuevas.
Cuando se instalan las pilas por primera vez, la pantalla mostrará brevemente una pantalla de prueba.
3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.
4. Deseche las pilas de acuerdo con las normas locales de eliminación y reciclaje.

Se recomienda quitar las pilas si la unidad no se va a usar durante un período prolongado.




Cuando se instalan las pilas por primera vez, la pantalla mostrará brevemente todos los dígitos.

SELECCIÓN DE MODO: LB, KG, STONE

Esta báscula viene configurada automáticamente en la unidad de medida libra (LB) de manera predeterminada.

1. Para cambiar el modo de unidad de medida, presione y suelte el botón UNIT (unidad) ubicado en la parte posterior de la báscula.
2. La pantalla alternará entre "lb", "kg" y "st lb".
3. Suelte el botón cuando se muestre la unidad de medida deseada. El modo de unidad de medida ahora está configurado.

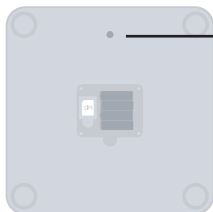

Botón **UNIT**
(Unidad)

INSTRUCCIONES DE USO

Tecnología SENSE ON: esta báscula digital se encenderá automáticamente cuando se suba a la báscula. No es necesario encender ni apagar la unidad.

PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS:

- Pésele antes de comer.
- Pésele a la misma hora del día; idealmente por las mañanas después de ir al baño.
- Pésele desnudo o con la mínima cantidad de ropa.
- La báscula digital debe utilizarse sobre una superficie plana y dura.
- El uso en superficies blandas, como alfombras, puede afectar a la precisión de los resultados.
- Manténgase quieto; no se agarres ni se apoye en nada.

INSTRUCCIONES SIMPLES PASO A PASO:

1. Súbase a la báscula. Permanezca quieto con los pies plantados uniformemente en la superficie de la báscula, esto permitirá distribuir el peso de manera más uniforme y obtener resultados más precisos.
2. Permanezca quieto y mantenga un contacto total con la superficie de la báscula.
3. Espere varios segundos para que la báscula calcule los resultados finales; notará que los números fluctúan varias veces antes de alcanzar el peso real.
4. Los resultados se mostrarán en la pantalla en el modo seleccionado: **LB, KG**. Los resultados se mostrarán durante aproximadamente 10 segundos.
5. El dispositivo se apagará aproximadamente 10 segundos después de que se complete la transmisión de datos.



INSTRUCCIONES DE USO



Permanezca quieto y mantenga los pies en pleno contacto; los resultados parpadearán dos veces y luego se bloquearán como resultado final.

El símbolo de señal en la parte superior izquierda indicará que la conexión celular se realizó correctamente.



Si la báscula no se conecta, el símbolo de la señal aparecerá con una "x": 



Después de conectarse, se transmitirán los datos de los resultados de peso; cuando los datos se transmitan correctamente, aparecerá en la pantalla la palabra OK y el símbolo de transmisión de datos. 



Si los datos no se transmiten, aparecerá el símbolo de datos pendientes. 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Extreme precauciones y use el sentido común cuando limpie un dispositivo electrónico.

- La báscula se puede limpiarse con un paño suave o limpiar con un paño húmedo.
- Siempre seque la parte superior de la báscula después de limpiarla.
- Nunca moje excesivamente ni sumerja la báscula en agua.
- Nunca use propelentes, abrasivos u otros productos químicos en la báscula.
- No desmonte este dispositivo; hacerlo puede anular la garantía del fabricante.
- Respete los rangos de temperatura de funcionamiento y almacenamiento indicados en la sección de Especificaciones de este manual.
- Respete la capacidad del rango de peso indicado; cargar un peso superior al rango indicado puede dañar la unidad.
- Se recomienda retirar las pilas si la báscula no se va a usar durante un período prolongado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CÓDIGOS DE ERROR

ERROR	DESCRIPCIÓN	SOLUCIÓN
	Sobrecarga / demasiado peso en la báscula	Vuelva a tomar la medición; es posible que el usuario esté fuera del rango de peso (de 11 lb a 440 lb).
	Error de tarjeta SIM	Revise y vuelva a instalar la tarjeta SIM si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
	Sin señal	Mueva la señal a un lugar con mejor recepción; póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
	Error de hardware	Vuelva a tomar la medición; si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
	Error de transmisión de datos	Trasládese a otro lugar, más cerca de una ventana; utilice el dispositivo en un lugar donde el teléfono móvil tenga una señal fuerte.
	No hay cobertura celular ni error de conexión celular	Trasládese a otro lugar, más cerca de una ventana; utilice el dispositivo en un lugar donde el teléfono móvil tenga una señal fuerte.
	Se reemplazó la tarjeta SIM precargada o la suscripción ya no es válida	Asegúrese de que la tarjeta SIM sea la tarjeta original; no reemplace la tarjeta SIM por su cuenta; póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
	Error de conexión del servidor	Trasládese a otro lugar, más cerca de una ventana; utilice el dispositivo en un lugar donde el teléfono móvil tenga una señal fuerte.
	Error de certificado	Comuníquese con el servicio de atención al cliente.
	Error de hardware	Vuelva a tomar la medición; si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

SÍMBOLOS DEL DISPOSITIVOS Y ETIQUETAS

Estos símbolos pueden aparecer en el dispositivo, en las instrucciones o en el embalaje y pueden variar según la marca y el modelo.

 Consulte el manual/folleto de instrucciones. NOTA: El color de fondo de este símbolo es azul.	 Radiación electromagnética no ionizante
 Número de serie	 Fecha de fabricación
 Corriente continua	 Símbolo general de recuperación/reciclable
 Pieza aplicada tipo BF	 Mantener seco
 FCC: Se espera que este dispositivo cumpla con la parte 15 de las normas de la FCC.	 Código de lote
IP21 Esto significa que el dispositivo puede estar protegido contra objetos extraños sólidos de 12,5 mm Φ y de mayor tamaño, y contra gotas de agua que caigan verticalmente.	 El símbolo indica que el producto no debe desecharse como residuo sin clasificar, sino que debe enviarse a instalaciones de recolección por separado para su recuperación y reciclaje.
 Precaución: Indica que es necesario tener precaución al usar el dispositivo o control cerca de donde está colocado el símbolo, o que la situación actual requiere la atención o la acción del operador para evitar consecuencias no deseadas.	

INFORMACIÓN DE LA FCC

INFORMACIÓN IMPORTANTE REQUERIDA POR LA FCC

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte con un distribuidor o un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

Este equipo cumple los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

El usuario final debe seguir las instrucciones de operación específicas para cumplir con la normativa de exposición a RF.

Este emisor no debe ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

El dispositivo portátil está diseñado para cumplir con los requisitos de exposición a ondas de radio establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (EE. UU.).

Estos requisitos establecen un límite de SAR de 4.0 W/kg en promedio sobre un gramo de tejido.

El valor SAR más alto reportado bajo esta norma durante la certificación del producto para su uso cuando se usa correctamente en la extremidad (manos/pies/tobillo/muñeca).

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Orientación y declaración del fabricante - emisiones electromagnéticas

El EQUIPO ME o SISTEMA ME es adecuado para entornos de atención médica en el hogar.

Advertencia: No se acerque al equipo quirúrgico activo de alta frecuencia ni a la sala blindada de radiofrecuencia de un sistema ME para imágenes por resonancia magnética, donde la intensidad de las perturbaciones electromagnéticas es elevada.

Advertencia: Se debe evitar el uso de este equipo junto a otros equipos o apilado con ellos, ya que podría provocar un funcionamiento incorrecto. Si tal uso es necesario, se debe observar este equipo y los otros equipos para verificar que funcionen normalmente.

Advertencia: El uso de accesorios, transductores y cables distintos de los especificados o suministrados por el fabricante de este equipo podría provocar un aumento de las emisiones electromagnéticas o una disminución de la inmunidad electromagnética de este equipo y dar lugar a un funcionamiento incorrecto.

Advertencia: Los equipos portátiles de comunicaciones por RF (incluidos los periféricos como cables de antena y antenas externas) no deben usarse a menos de 30 cm de cualquier parte del equipo ME, incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, podría degradarse el rendimiento de este equipo.

Tabla 1

Orientación y declaración del fabricante - emisiones electromagnéticas

Prueba de emisiones	Cumplimiento
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1
Emisiones de RF CISPR 11	Clase B
Emisiones armónicas IEC 61000-3-2	No corresponde
Fluctuaciones de voltaje y parpadeo IEC 61000-3-3	No corresponde

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Tabla 2

Prueba de inmunidad	Nivel de prueba IEC60601-1-2	Nivel de conformidad
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV por contacto; ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV por aire	± 8 kV por contacto $\pm kV$, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV por aire
Transitorios eléctricos rápidos/de ráfaga IEC 61000-4-4	No corresponde	No corresponde
Transitorios eléctricos rápidos/de ráfaga IEC 61000-4-5	No corresponde	No corresponde
Caidas de voltaje, interrupciones breves y variaciones de tensión en las líneas de entrada de la fuente de alimentación IEC 61000-4-11	No corresponde	No corresponde
Campo magnético de frecuencia de alimentación IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz/60 Hz	30 A/m 50 Hz/60 Hz
RF conducida IEC61000-4-6	No corresponde	No corresponde
RF irradiada IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM a 1 kHz	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM a 1 kHz

NOTA: U_t es el voltaje de red de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Tabla 3

Orientación y declaración del fabricante - emisiones electromagnéticas

RF radiada IEC61000-4-3 (Especificaciones de prueba de INMUNIDAD DEL PUERTO DE LA CARCASA a los equipos de comunicación inalámbrica por radiofrecuencia)	MHz de inmunidad de prueba	MHz de banda	Servicio	Modulación	Potencia de modulación (W)	Distancia (m)	Nivel de prueba de inmunidad (V/m)	Nivel de conformidad (V/m)
	385	380-390	TETRA 4000	Modulación de pulso b) 18 Hz	1, 8	0, 3	27	27
	450	430-470	GMRS 460, FRS 460	FM c) ± 5 kHz de desviación 1 kHz sinusoidal	2	0, 3	28	28
	710	704-787	Banda LTE 13,17	Modulación de pulso b) 217 Hz	0, 2	0, 3	9	9
	745							
	780							
	810	800-960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, Banda LTE 5	Modulación de pulso b) 18 Hz	2	0, 3	28	28
	870							
	930							
	1720	1700-1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; Banda LTE 1,3,4,25; UMTS	Modulación de pulso b) 217 Hz	2	0, 3	28	28
	1845							
	1970							
	2450	2400-2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, Banda LTE 7	Modulación de pulso b) 217 Hz	2	0, 3	28	28
	5240	5100-5800	WLAN 802.11a/n	Modulación de pulso b) 217 Hz	0, 2	0, 3	9	9
	5500							
	5785							

ESPECIFICACIONES

Nombre	Báscula digital
Número de modelo	210-1113C
Sistema de visualización	Pantalla LCD digital
Dimensiones de la báscula	12,6" x 12,6" x 1,12" / 320 x 320 x 28,5 mm
Peso de la báscula	2,16 kg/4,7 lb (sin pilas)
Unidad de medida	Libra (lb) / Kilogramo (kg) / Stone (st lb)
Rango de medición	11 lb – 440 lb / 5 kg – 200 kg
División	0,1 kg/0,2 lb
Precisión	5-100 kg, 0,05 kg/0,2 lb; 100,1-200 kg, 200± 0,5 kg
Temperatura de funcionamiento:	De 5 °C a 40 °C / de 41 °F a 104 °F Humedad relativa: ≤90 % HR Presión atmosférica: De 860 hPa a 1060 hPa
Temperatura de almacenamiento:	De -20 °C a 60 °C / -4 °F a 140 °F Humedad relativa: ≤90 % Presión atmosférica: De 500 hPa a 1060 hPa
Fuente de energía	4 pilas AA de 6 V
Duración de las pilas	Aproximadamente 650 mediciones
Encendido automático	Tecnología Sense On
Apagado automático	Después de 10 segundos de inactividad
Modo de operación	Funcionamiento continuo
Accesorios	Manual de instrucciones; Cuatro (4) pilas AA

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Felicitaciones por comprar esta báscula. Su báscula está cubierta por la siguiente garantía limitada a partir de la fecha de compra, y sujeta a los siguientes términos y condiciones:

El garante garantiza que su báscula estará libre de defectos de materiales y de mano de obra bajo uso normal del consumidor por un período de un año para el comprador original del producto.

El mantenimiento periódico, la reparación y el cambio de piezas debido al desgaste normal quedan excluidos de la cobertura. Defectos o daños ocasionados por: (a) operación incorrecta, almacenamiento, mal uso o abuso, accidente o negligencia, como daños físicos (grietas, rasguños, etc.) en la superficie del producto debido a un mal uso; (b) contacto con líquidos, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración intensa, arena, suciedad o similares, calor extremo o alimentos; (c) el uso de la báscula con fines comerciales o someter la báscula a un uso o condiciones anormales; o (d) otros actos que no sean culpa del garante, están excluidos de la cobertura. Esta garantía no cubre las pilas u otras fuentes de alimentación que puedan venir incluidas con la báscula o usarse con ella.

Si la báscula no cumple esta garantía limitada, devuélvala con franqueo prepago a: A la atención de: Repair Department, 1175 Lakeside Drive, Gurnee, IL, 60031. Cuando devuelva un producto, incluya también: (i) una copia de su recibo, factura de venta u otro comprobante de compra comparable; (ii) una descripción escrita del problema; y (iii) su nombre, dirección y número de teléfono. Embale cuidadosamente el producto para evitar cualquier daño que pueda producirse durante el transporte; se recomienda contratar un seguro de envío con acuse de recibo. A nuestra elección, el Garante reparará o reemplazará la unidad que presente defectos de materiales o mano de obra en condiciones normales de uso por parte del consumidor. El comprador será notificado de cualquier reparación adicional necesaria antes de completar la reparación, y será responsable de los gastos de piezas, si los hubiera, y de los gastos de reparación no cubiertos por esta garantía limitada.

SALVO LO DISPUESTO EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, SE EXCLUYEN TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES EXPRESAS E IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. LA REPARACIÓN O REEMPLAZO, SEGÚN SE INDICA EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, ES EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR, Y SE PROPORCIONA EN REEMPLAZO A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. EN NINGÚN CASO, EL GARANTE SERÁ RESPONSABLE, YA SEA DE FORMA CONTRACTUAL O POR RESPONSABILIDAD CIVIL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), POR DAÑOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, O POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O EMERGENTE DE NINGÚN TIPO, NI POR DAÑOS O PÉRDIDA DE OTRA PROPIEDAD O EQUIPOS, NI POR LESIONES PERSONALES, EN LA MEDIDA MÁXIMA QUE ESTOS DAÑOS SE PUEDAN RECHAZAR POR LEY.

Algunos estados y jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños incidentales o emergentes, ni la limitación de la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de una jurisdicción a otra.