

SMARTHEART®

Automatic Digital

Arm Blood Pressure Monitor

Model # 01-5811T



THIS QUICK START GUIDE IS INTENDED AS A SUPPLEMENT TO THE INSTRUCTION MANUAL. PLEASE READ THE COMPLETE MANUAL PRIOR TO FIRST USE.

Before applying your blood pressure cuff, be sure you have selected the appropriate size cuff:


Wide-Range Adult Cuff fits arm circumference: 8.6" – 16.5" (22–42 cm).

Additional cuffs are available for order on the included order form or by calling 866-326-1313.

A 15 minute resting period is needed to stabilize the body prior to taking a reading. No eating, drinking or smoking while resting.

Applying the Arm Cuff

Remove any constrictive clothing or jewelry that may interfere with cuff placement. Wrap the cuff snugly around your left arm. Position the cuff's bottom edge half an inch ABOVE the elbow joint. Position the air tubing over the main artery (on the inside of your arm). You should be able to insert one finger between your arm and cuff.

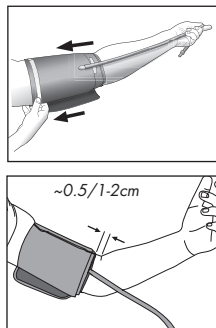

Taking Your Measurement

Please read the preceding portions of this manual prior to taking your first reading.

Reminder, it is important to avoid smoking, eating, taking medication, alcohol consumption or physical activity 30 minutes prior to taking a reading.

User will default to the last User Bank used; consult the manual for instructions on how to change the User to ensure accurate memory storage and review.

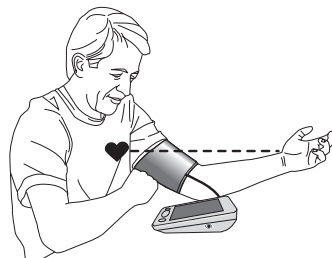


Fig. 1

1. Position the monitor on a flat, stable surface with the digital display in view. After applying the cuff insert the cuff tubing connector into the port on the left side of your monitor. Rest your elbow on a solid surface with your palm facing upward. Elevate your arm so that the cuff is at the same level as your heart, Fig 1. Relax your left hand.
2. Press and release the **POWER** button to turn the unit on; the unit will briefly flash a self-test, Fig 2.
3. The display will briefly show the last measurement and current memory bank in use, 1 or 2.
Press the **M1** or **M2** button to select a different memory bank if desired. If no selection is made, the unit will default to the memory bank displayed.
4. The cuff will automatically inflate; you will see the numbers increase on the display screen and feel the cuff inflate.
5. When the measurement is complete, the cuff will automatically deflate, then your blood pressure measurement and pulse reading results will show on

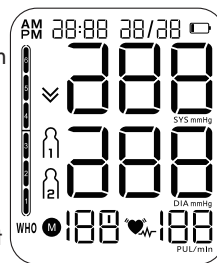


Fig. 2

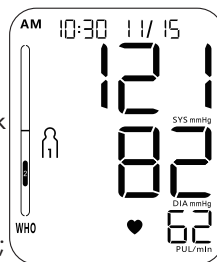


Fig. 3

the display screen at the same time, Fig 3.

6. Consult the included Instruction Manual for information on interpreting your reading results.
7. The reading will automatically be stored in memory, up to 120 readings per user bank.
8. Select **POWER** to turn the unit off and conserve energy and battery life. The unit will automatically shut-off approximately 1 minute after use.

Please Note:

- You can stop the inflation or deflation process of the cuff at any time by pressing the **POWER** button.
- Many factors such as genetics, age, sex, altitude, physical activity, anxiety, muscular development, certain medications or even the time of day can influence blood pressure.
- Blood pressure varies from moment to moment; even readings taken after proper rest periods can vary. Home blood pressure readings may vary as much as 10-20 points from ones taken at your doctor's office.
- Variations in your individual readings should only be interpreted by your physician or trained health care professional.
- We encourage you to consult with your physician to achieve the maximum benefit from your blood pressure monitor.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR ARE EXPERIENCING DIFFICULTIES, PLEASE CALL THE TOLL-FREE CUSTOMER SERVICE HELP LINE FOR FURTHER ASSISTANCE AT 1-866-326-1313.

SMARTHEART®

Automático Digital

Monitor Para la Presión Arterial

Modelo # 01-5811T



ESTA GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDO SE PIENSA COMO SUPLEMENTO AL MANUAL DE LA INSTRUCCIÓN. LEA EL MANUAL COMPLETO ANTES DEL PRIMER USO.

Antes de colocarse el brazalete para medición de la presión arterial, asegúrese de haber seleccionado el tamaño de brazalete adecuado:



Un brazalete adulto para adultos de amplia gama se adapta a una circunferencia de brazo entre 8.6"–16.5" (22–42 cm).

Hay disponibles otros brazaletes para efectuar el pedido en el formulario de pedido que se adjunta.

Es necesario un período de descanso de 15 minutos para estabilizar el cuerpo antes de tomarse la presión. No coma, no beba ni fume mientras descansa.

Cómo colocar el brazalete

Quítese toda la ropa o las alhajas que pudieran interferir con la colocación del brazalete. Deslice el cilindro del brazalete en su brazo izquierdo y alinee la manguera de aire sobre la arteria principal en el lado interno de su brazo. Coloque el borde inferior del manguito media pulgada ARRIBA de la articulación del codo. Debe poder insertar un dedo fácilmente entre el brazo y el brazalete.

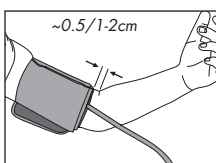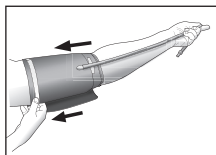

Tomando su medida

Lea las partes anteriores de este manual antes de realizar su primera lectura.

Recordatorio, es importante evitar fumar, comer, tomar medicamentos, consumir alcohol o realizar actividad física 30 minutos antes de tomar una lectura.

El usuario usará de forma predeterminada el último banco de usuario utilizado; consulte el manual para obtener instrucciones sobre cómo cambiar el usuario para garantizar un almacenamiento y una revisión precisos de la memoria.



Fig. 1

1. Coloque el monitor en una superficie plana y estable, con el visor digital a la vista. Siéntese con los pies planos sobre el suelo y sin cruzar las piernas. Una vez colocado el brazalete, inserte el tubo conector en el puerto localizado del lado izquierdo del monitor. Deje reposar el codo sobre una superficie sólida, con la palma de la mano hacia arriba. Eleve el brazo a fin de que el brazalete quede a la altura de su corazón, Fig. 1. Relaje la mano izquierda.

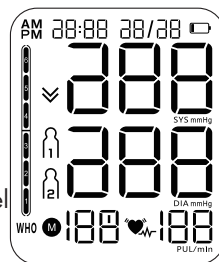


Fig. 2

2. Pulse y libere el botón **POWER** para encender la unidad, que realizará brevemente un auto test de arranque, Fig. 2.
3. El visor mostrará brevemente la última medición y el banco de memoria en uso, 1 ó 2.
Pulse el botón **M1** o **M2** para seleccionar un banco de memoria diferente, si así lo desea. En caso de no hacer selección alguna, la unidad visualizará el banco de memoria predeterminado.
4. El brazalete se inflará automáticamente; usted verá van subiendo los números en la pantalla del visor y

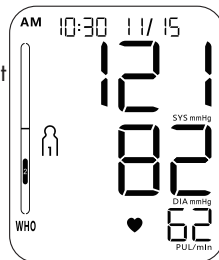


Fig. 3

sentirá cómo se va inflando el brazalete.

5. Una vez completada la medición, el brazalete se desinflará automáticamente; después, se mostrarán en el visor los resultados de la medición de la presión arterial y del pulso simultáneamente, Fig. 3.
6. Para más información, consulte Interpretación de los Resultados.
7. La lectura se guardará automáticamente en la memoria, hasta un máximo de 120 lecturas por banco de usuario.
8. Seleccione el botón **POWER** para apagar la unidad y ahorrar energía y la vida útil de la batería. La unidad se apagará automáticamente alrededor de 1 minuto después del uso.

Tenga en Cuenta lo Siguiente

- Para interrumpir el proceso de inflado o desinflado en cualquier momento, presione el botón **POWER**.
- Muchos factores pueden influir en la presión arterial, como por ejemplo genética, edad, sexo, altitud, actividad física, ansiedad, desarrollo muscular, determinada medicación o, incluso, la hora del día.
- La presión arterial varía de un momento al otro; incluso las lecturas tomadas después de períodos de descanso adecuados pueden variar. Las lecturas de presión arterial en el hogar pueden diferir en 10 a 20 puntos de las tomadas en el consultorio del médico.
- Las variaciones en sus lecturas individuales sólo debe interpretarlas su médico o un profesional de cuidados médicos capacitado.
- Lo instamos a que consulte con su médico para lograr el óptimo beneficio de su monitor de presión arterial.

SI TIENE ALGUNA DUDA O EXPERIMENTA PROBLEMAS, LLAME A LA LÍNEA GRATUITA DE ASISTENCIA AL CLIENTE PARA OBTENER ASISTENCIA ADICIONAL, 1-866-326-1313.