

R.P.M. PRO™

FETAL DOPPLER BT-ENABLED

Model 210-9110B



THIS QUICK START GUIDE IS INTENDED AS A SUPPLEMENT TO THE INSTRUCTION MANUAL. PLEASE READ THE COMPLETE MANUAL PRIOR TO FIRST USE.



HOW TO USE

If using an app or monitoring software, ensure App is downloaded and Bluetooth is enabled before use. This device may be used without connecting to an App.


1. Position yourself flat or very reclined with comfortable access to your bare abdomen.
2. Power ON the doppler.
3. Apply a generous amount of ultrasound gel to the end of the doppler or directly onto your abdomen.
4. Starting at the center of your abdomen near the pelvic bone, gently glide the probe towards your belly button, slowly radiating out until the heartbeat is detected. Consult the guide for optimal location based on current pregnancy week.
5. If after a few minutes, you cannot locate the heartbeat, you may need to wait for the fetus to make growth progress or change position. Always discuss concerns with your healthcare professional.

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY TO ENSURE PROPER USE AND SAFE OPERATION OF YOUR FETAL DOPPLER

TIPS FOR SUCCESSFUL USE OF FETAL DOPPLERS:

- Suitable for 12 weeks or later in pregnancy; earlier use may not detect the heartbeat.
- Use a generous amount of gel to help limit audible static; apply more as needed.
- Movement of doppler should be very slow.
- Ideal time for heartbeat detection: within 1 hour of eating, within 30 minutes of getting up, within 30 minutes of bedtime.
- Be patient and calm; note that you may detect your own heartbeat in addition to the fetus.

FETAL HEART LOCATION

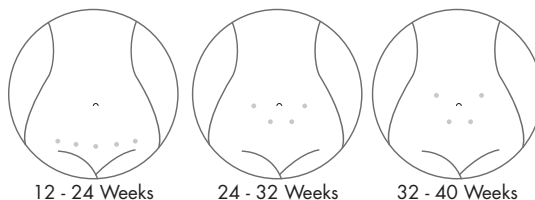

Toll-Free Customer Care Help Line: 1-866-326-1313
Monday – Friday 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST
For urgent matters, please contact your health care professional.
www.veridianhealthcare.com

#93-2213 01/25
©2025 Veridian Healthcare, LLC

QUICK START GUIDE • ENGLISH

R.P.M. PRO

DOPPLER FETAL

ACTIVACIÓN POR BT

Modelo 210-9110B



LEA ATENTAMENTE ESTAS
INSTRUCCIONES PARA GARANTIZAR EL
USO CORRECTO Y EL FUNCIONAMIENTO
SEGURO DEL DOPPLER FETAL

ESTA GUÍA DE INICIO RÁPIDO TIENE EL OBJETIVO DE SERVIR COMO COMPLEMENTO DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES. LEA EL MANUAL COMPLETO ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ EL PRODUCTO.



CÓMO USAR


Si va a usar una aplicación o software de monitorización, asegúrese de haber descargado la aplicación correspondiente y de que la función de Bluetooth está activada antes de usar el producto. Este dispositivo puede utilizarse sin la necesidad de conectarse a una aplicación.

1. Colóquese en posición horizontal o muy reclinada de manera que pueda acceder cómodamente a su abdomen descubierto.
2. Encienda el doppler.
3. Aplique una cantidad generosa de gel para ultrasonidos en el extremo del doppler o directamente sobre el abdomen.
4. Comenzando en el centro del abdomen, cerca del hueso pélvico, deslice suavemente la sonda hacia el ombligo, irradiando lentamente hacia fuera hasta detectar el latido del corazón. Consulte la guía para conocer la ubicación óptima según la semana de gestación actual.
5. Si no consigue localizar el latido del corazón después de unos minutos, es posible que tenga que esperar a que el feto progrese en su crecimiento o cambie de posición. Siempre consulte sus inquietudes con un profesional de atención médica.

CONSEJOS PARA UTILIZAR CORRECTAMENTE LOS DOPPLERS FETALES:

- Puede utilizarse a partir de la semana 12 de embarazo; si se utiliza antes, es posible que no detecte los latidos del corazón.
- Utilice una cantidad generosa de gel para limitar la estática audible; aplique más gel según sea necesario.
- El movimiento del doppler debe ser muy lento.
- Momento ideal para detectar latidos del corazón: antes de que transcurra 1 hora después de comer, antes de que transcurran 30 minutos después de levantarse, antes de que transcurran 30 minutos después de acostarse.
- Tenga paciencia y calma; tenga en cuenta que puede detectar sus propios latidos además de los del feto.


LOCALIZACIÓN DEL CORAZÓN FETAL

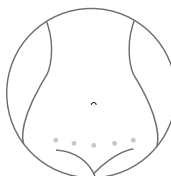

12 - 24 semanas



24 - 32 semanas

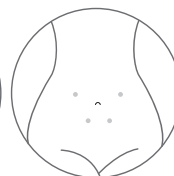

32 - 40 semanas

Línea gratuita de atención al cliente: 1-866-326-1313
De lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
hora estándar del centro (CST)

Para asuntos urgentes, comuníquese con un
profesional de atención médica.
www.veridianhealthcare.com

#93-2213 01/25
©2025 Veridian Healthcare, LLC

GUÍA DE INICIO RÁPIDO • ESPAÑOL